



Styrken kommer innenfra

everX FlowTM
fra GC

Fiberforsterket
flytende kompositt
til dentinforsterkning

GC

everX Flow fra GC

Styrken kommer innenfra


everX Flow er en fiberforsterket flytende kompositt som erstatter dentinen og gir tannen styrke. Ved å applisere **everX Flow** oppnår du samme effekt som stålkonstruksjonen i fundamentet under et hus: Et sterkt fundament som hindrer infraksjoner i tannen.

everX Flows enkle applisering, de to fargemuligheter og den unike styrke kan raskt bli ditt nye "must have"-produkt når du trenger en sterk konus eller oppbygging.



Med overlegen **bruddstyrke** oppnår du **holdbare** store restaureringer

De fleste komposittmaterialer har gode egenskaper når det gjelder emaljeerstatning: høy slitestyrke og estetikk. Desverre er disse materialer ikke like optimale som dentinerstatning når det kommer til motstand mot frakturer. **everX Flow** tar tak i utfordringen, da den med sitt høye innhold av små fibre, implementert i resinmatrixen, gir en uovertruffen bruddstyrke nesten som dentin. Det gjør materialet velegnet til effektivt å forsterke større restaureringer, i kombinasjon med konvensjonell kompositt som emaljelag.

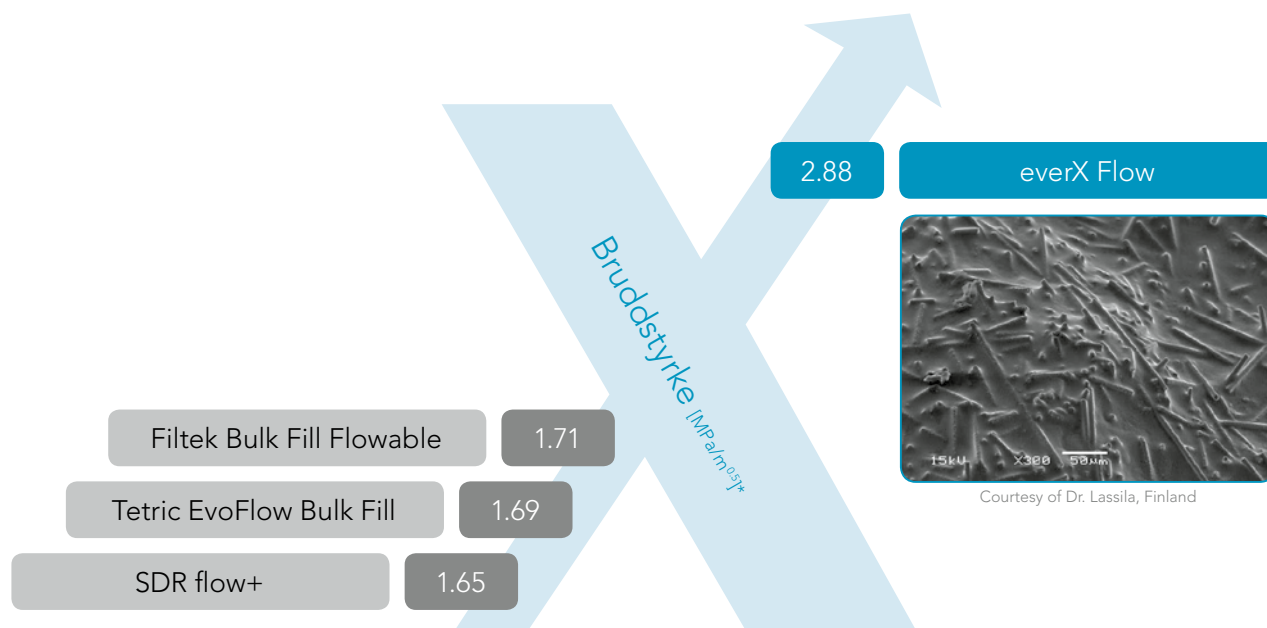


* Kilde: GCC R&D - Data on file.
Test utført etter ASTM E399-90 (1997).

Perfekt flyteevne til enkel applisering og god adapsjon



Courtesy of
Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Takket være de tixotropiske egenskaper, flyter everX Flow lett, og vil fint adaptere til alle kavitetsvegger og preparasjoner **uten å danne porøsiteter**. Med den kontrollerte flow kan du enkelt plassere everX Flow i overkjeven **uten at materialet flyter ut**.

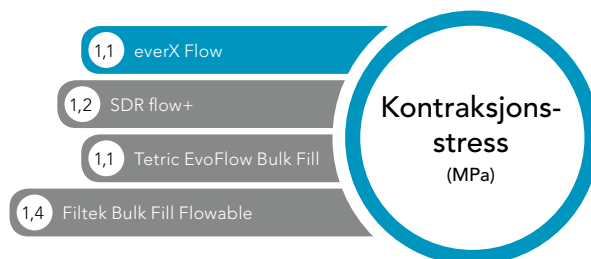

Kilde: GCC R&D - Data on file.

To farger er alt du trenger

Bulk farge

Polymerisasjonsdybde
5.5 mm

Optimal til **dype**
posteriore kaviteter

Dentin Farge

Polymerisasjonsdybde
2.0 mm

Optimal til **bedre**
estetiske fyllinger
og til **oppbygginger**

Optimal til å **forsterke** store kaviteter
Og til å oppnå langvarige **estetiske resultater**



Kavitetspreparering



Applisering av **everX Flow**
(Dentin farge)



Siste lag Essentia
(Universal farge)



Post-operativ situasjon

Takk til Georg Benjamin,
Germany



Kavitetspreparering



Applisering av **everX Flow**
(Bulk farge)



Siste lag med **G-aenial Universal**
Injectable (farge A3)



Post-operativ situasjon

Takk til Dr. Lucile Dahan,
France

everX Flow fra GC

Styrken kommer innenfra



**Bulk
farge**
til dype
kaviteter

**Dentin
farge**
til estetiske
fyllinger

everX Flow

012898	everX Flow, sprøyte 2 ml (3.7g) Bulk
012899	everX Flow, sprøyte 2 ml (3.7g) Dentin



Preparér kaviteten



Ved Kl. II kaviteter bygges de manglende veggene med konvensjonell kompositt



Fyll kaviteten med **everX Flow**



Ferdig resultat med konvensjonell kompositt som toppdekke

Orientér deg også om



G-Premio BOND
Universal bonding



G-aenial Universal Injectable
Injiserbar sterk kompositt



Essentia Universal
Universal kompositt

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND og G-aenial Universal Injectable er trademarks fra GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ and Tetric EvoFlow Bulk Fill er ikke trademarks fra GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Nordic AB
Strandvägen 54
S-193 30 Sigtuna
Sverige
Tel. +46 768 54 43 50
info.nordic@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

