

Hygiensystem från Dürr Dental – en bra trygghetskänsla.

Fyra färger, fyra områden – logiskt och enkelt



TRYCKLUFT
SUG
BILDGIVNING
TANDVÅRD
HYGIEN

Det bästa är när du kan lita på ett system

Redan 1965 utvecklade Dürr Dental det första desinfektionsmedlet för sugsystem med Orotol®. Det var startskottet för vår kontinuerliga kompetensuppbyggnad inom hygienområdet. Idag förlitar sig tandläkare i hela världen på Dürr hygiensystem som skyddar deras mottagningar på många sätt.

Förutom produkter från Dürr hygiensystem erbjuder vi dig ett omfattande produktprogram, som din personal har nytta av i det dagliga arbetet. Vår rådgivning på plats är en direkt hjälp för din personal. Vår service hjälper dig vid frågor om våra produkter. Och bästa kvalitet genom flera decenniers erfarenhet går kontinuerligt hand i hand med innovationer som orienterar sig efter de praktiska behoven.

Rådgivning

- Fortbildning, utbildning och rådgivning på plats
- Expertkunskaper från kvalificerade utbildare
- Lösningorienterade praktiska tips individuellt anpassade efter mottagningarna
- Stöd vid uppbyggnad av ett hygiensystem




Service

- Professionell och lösningorienterad produktrådgivning
- Aktuellt informationsutbud på Internet



Dürr hygien system

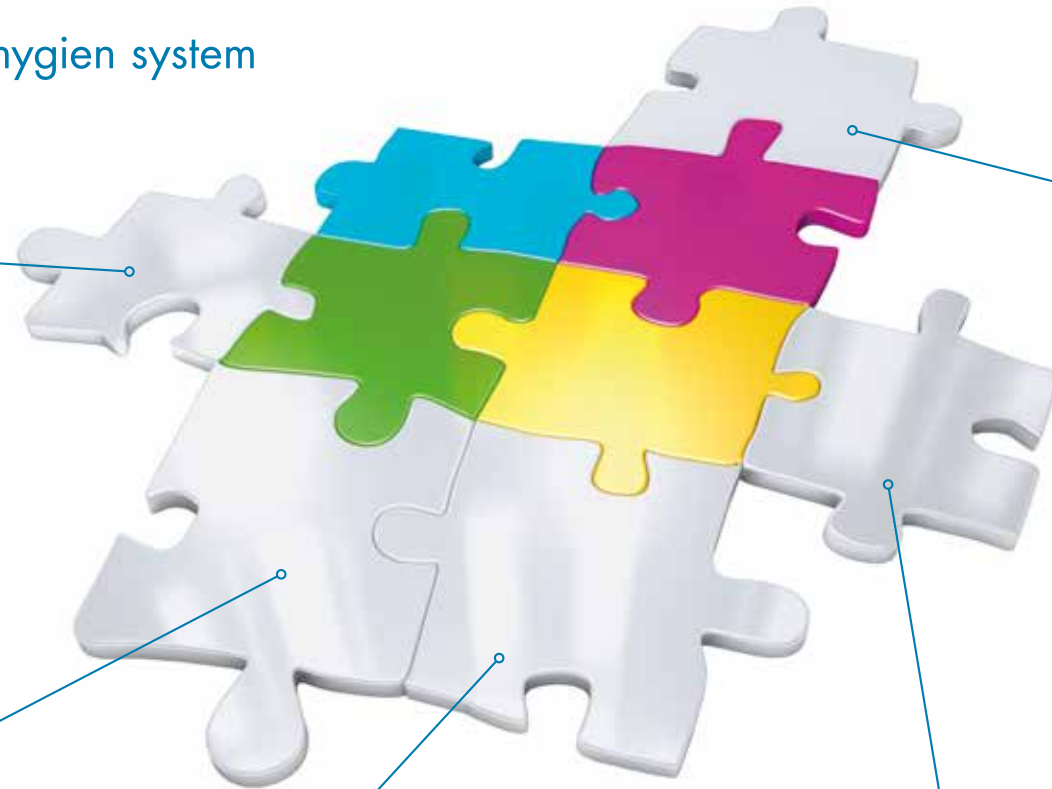

Kvalitet

- Hög tillverkningskvalitet – Made in Germany
- Säkerhet genom definierade och kontrollerade processer
- Lång erfarenhet som tillverkare av desinfektions- och rengöringsmedel



Innovation

- Modern produktdesign
- Uppdateras vid förändringar i lagstifningen
- Uteslutande biologiskt nedbrytbara produkter

Användarorientering

- Enklare användningshjälp genom Dürr hygiensystem med färger
- Karakteristisk och optimalt lagringsbar 2,5 l-flaska från Dürr hygiensystem
- Enkel hantering av produkterna genom ergonomisk flaskform
- Appliceringshjälp för optimal dosering



Fyra färger – fyra områden

- | | |
|---------------------------|---------|
| ■ Blå för instrument | Sida 06 |
| ■ Grön för ytor | Sida 08 |
| ■ Rosa för hud och händer | Sida 12 |
| ■ Gul för specialområden | Sida 14 |

Det bästa är när allt har ett system

Vid infektionsskydd, desinfektion och rengöring får ingenting lämnas åt slumpen. Av dessa skäl har vi genom många tester visat att alla preparat uppfyller kraven som är avgörande vid den praktiska användningen.

Säker

- Omfattande inverkansspektrum: baktericid, fungicid, tuberkulocid, virucid
- Kontrollerad, tillförlitlig verkan
- Utan undantag VAH-listat och EN-konform
- Hög desinfektions- och rengöringskraft

Skonsam

- Överlägsen förening av verksamma ämnen
- Speciellt skonsamma och vårdande för huden
- Mycket skonsam mot material, rekommenderas av ledande unit-tillverkare
- Kliniskt testad
- Biologiskt nedbrytbar

Bekvämt

- Enkel och effektiv hantering
- Praktiska, enhetliga förpackningsstorlekar
- Rengöring enligt plan
- Dosering i lock
- Mycket ekonomisk användning

Snabb

- Korta verkningstider
- Torkar snabbt utan att lämna rester
- Praktisk användning
- Enkel dosering

Vår rekommendation för din klinik:

HD 410
Handdesinfektion

HD 435
Tvättlotion

FD 366 sensitive
Desinfektion av känsliga ytor

FD 360
Konstläderrengöring och -vård

FD 366 sensitive wipes

FD 322 + FD 333 forte
Snabbdesinfektion

FD 333 wipes
Desinfektionsservetter

MD 550
Fontänskälsrengöring

MD 555 cleaner
Specialrengöringsmedel för sugsystem

Orotol® plus
Sugsystemsdesinfektion

ID 212 eller ID 213
Instrumentdesinfektion

ID 220
Borrdesinfektion



Desinfektion och rengöring Instrument och borrar

■ ID 212 Instrumentdesinfektion

Koncentrat för rengöring och desinfektion av instrument med optimal materialkompatibilitet



Hållbarhetstid sju dagar

- Baktericid inkl. tb, fungicid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus)
- Lämplig för allmänna kirurgiska och roterande instrument
- Extra kort verkningsstid vid behandling i ultraljudsbad
- Mycket skonsam mot material i instrument med gummi-/silikonandel

Verksamma ämnen: Kvävtära ammoniumföreningar
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygasonic, Hygobox

■ ID 212 forte Instrumentdesinfektion

Koncentrat för rengöring och desinfektion av instrument med kort verkningsstid i ultraljudsbad



Hållbarhetstid sju dagar

- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus)
- Lämplig för allmänna kirurgiska och roterande instrument
- Högt korrosionsskydd och lång hållbarhetstid på sju dagar
- Ytterst snabb desinfektion och rengöring i ultraljudsbad

Verksamma ämnen: alkylamin, kvävtära ammoniumföreningar
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygasonic, Hygobox

■ ID 213 Instrumentdesinfektion

Helt antiviralt koncentrat för rengöring och desinfektion av allmänna kirurgiska och roterande instrument



Helt virucid

- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Utomordentlig rengöringsverkan – löser hårt sittande smuts
- Särskilt ekonomisk genom lång hållbarhetstid på 14 dagar
- Mycket skonsam mot material genom korrosionsskydd

Verksamma ämnen: alkylamin, kvävtära ammoniumföreningar
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygasonic, Hygobox

■ ID 215 Enzymatiskt rengöringsmedel för instrument

Koncentrat för manuell, enzymatisk rengöring av instrument före desinfektion



NYHET!

- Baktericid, levurocid, begränsat virucid
- Skyddar personal genom mikrobicid verkan
- Utomordentlig rengöringsverkan – löser hårt sittande smuts
- Mycket skonsam mot material

Verksamma ämnen: Kvävtära ammoniumföreningar, guanidföreningar
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygasonic, Hygobox, Borr bad

■ ID 220 Borrdesinfektion

Helt virucid, bruksfärdig lösning för rengöring och desinfektion av roterande instrument



Helt virucid

- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Stor rengöringskraft speciellt för små borrar och fräsar
- Högt korrosionsskydd och lång hållbarhetstid på sju dagar
- Mycket korta verkningsstider

Verksamma ämnen: alkoholer i alkalisk miljö
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygasonic, Borr bad

Apparater och tillbehör

■ Hygobox

Robust, stabil transport- och desinfektionsbox som rymmer upp till 3 liter



- Ergonomiskt formade handtag för säker transport
- Tipsäker dropposition för den integrerade insatsen
- Instrumenten fastnar inte tack vare hålsliitsar med speciell form

Mått (HxBxD): 13x32,5x21 cm
Färgvarianter: Antracitfärgat lock med blå eller gul insats, lock finns i fem olika färger med vit insats
Vår rekommendation: ID 212, ID 212 forte, ID 213, MD 520, MD 535

■ Hygasonic

Uppvärmbart ultraljudsbad för noggrann rengöring av instrument, borrar, proteser osv. Dessutom kan instrumenten desinficeras säkert genom användning av ID-/MD-produkterna.



- Effektiv desinfektion och rengöring som är skonsam för materialet
- Jämn rengöring genom ultraljudsoptimering
- Prestandaökning genom "boostfunktion"
- Syreborttagning i lösningar genom "avgasningsfunktion"

Mått (HxBxD): 21,4x30x17,9 cm
Trågvolymer: 2,75 liter
Tillbehör: lock, glassats, insats-/instrumentkorg
Vår rekommendation: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 220, MD 530, MD 535

■ Hygopac Plus, Hygofol

Validerbar foliesvetsaggregat för normanpassad försegling av sterilförpackningar som Hygofol.



- Intelligent valideringskoncept enligt DIN EN ISO 11607
- Datalagring via SD-kort eller nätverk
- Hög förseglingshastighet

Mått:
Hygopac Plus (HxBxD): 170 x 370 x 140 mm
Hygofol Påse (BxL): 7,5 cm, 10 cm eller 15 cm x resp. 30 cm
Hygofol Rullar (BxL): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm eller 25 cm x resp 100 m

Dokumentation

■ Hygoseal Plus

Bruksfärdigt test av förseglingsösm – sterilfolier med integrerad indikator för den dagliga kvalitetskontrollen



- Säker och visuell bedömning av säkerheten hos förseglingar
- Snabbt genomförande med direkt resultat
- Enkel hantering
- Tydlig dokumentation av testresultaten med kvalitetsrelaterat intyg

Förpackningsstorlek: 100 styck

■ Hygoprint

System för märkning av sterilförpackningar



- Snabb och enkel dokumentation av steriliseringsprocessen
- Fullständig märkning med alla relevanta data
- Lätt och enkel att hantera

Tillbehör: enkel- eller dubbelhäftande etiketter, dokumentationsblock med 100 blad



Desinfektion och rengöring

Ytdesinfektion

■ FD 300 Ytdesinfektion*

Helt antiviralt och alkoholfritt koncentrat för desinfektion av ytor och föremål



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Extra kort verkningstid
- Mycket ekonomisk: Upp till 500 liter bruksfärdig lösning vid 0,5 %
- Hög materialkompatibilitet

Verksamma ämnen: alkylamin, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: 2,5 l
rekommandation: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 312 Ytdesinfektion*

Alkoholfritt koncentrat för desinfektion av ytor och föremål



- Baktericid, levurocid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus)
- Ekonomisk användning: upp till 250 liter bruksfärdig lösning vid 1 %
- Kontrollerad materialkompatibilitet
- Extra behaglig doft

Verksamma ämnen: Kvartära ammoniumföreningar
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact


■ FD 370 cleaner Rengöringsmedel för läkarmottagningar

Koncentrat för desinfektion av ytor och föremål



- Effektivt rengöringsmedel för inventarier i mottagningen, apparater och golv
- Ingen neutralisering av desinfektionsverkan
- Rengjorda ytor klibbar inte eller missfärgas i kombination med desinficeringspreparat
- Mycket ekonomisk: Upp till 250 liter bruksfärdig lösning vid 1 %

Innehåller: Ickejoniska tensider
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: FD 300, FD 312

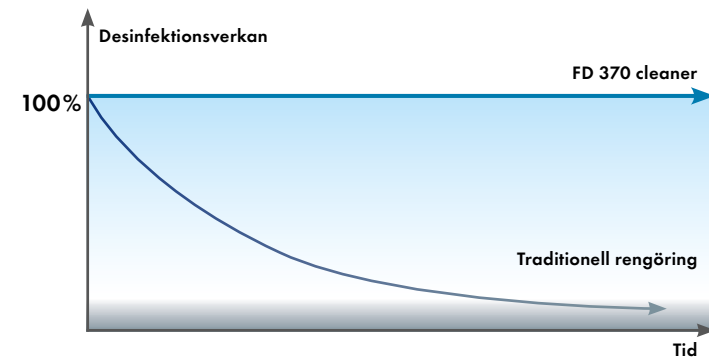

Förändring av desinfektionsverkan genom användning av konventionella joniska rengöringsmedel och ickejoniska rengöringsmedel för läkarmottagningar
 FD 370 cleaner

i * Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Snabbdesinfektion

■ FD 322 Snabbdesinfektion

Snabbt verkande bruksfärdig lösning för desinfektion och rengöring av ytor



- Baktericid inkl. tb, fungicid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus Polyoma SV 40-virus)
- Mycket kort verkningstid
- Torkar utan rester
- Kontrollerad materialkompatibilitet

Verksamma ämnen: alkoholer
FD 322 finns som: 750 ml för Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Vår rekommendation: Hygowipe Plus, spraymunstycke, 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact
FD 322 perfume free finns som: 2,5 l, 10 l
Vår rekommendation: 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 333 forte Snabbdesinfektion

Helt bruksfärdig lösning för snabbdesinfektion och rengöring av ytor på medicinprodukter och medicinska inventarier



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Mycket hög materialkompatibilitet
- Frisk citrondoft
- Torkar snabbt

Verksamma ämnen: alkoholer, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: 750 ml för Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Vår rekommendation: Hygowipe Plus, spraymunstycke, 600 ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 366 sensitive Desinfektion av känsliga ytor

Alkoholreducerad bruksfärdig lösning för desinfektion och rengöring av särskilt känsliga ytor



- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus)
- Snabb desinfektionsverkan
- Vid behandlingsenheter idealisk i kombination med FD 360 konstläderrengöring
- Kontrollerad materialkompatibilitet - rekommenderas av ledande unit-tillverkare

Verksamma ämnen: alkoholer, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: 750 ml för Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Vår rekommendation: Hygowipe Plus, spraymunstycke, 600ml-sprayflaska, FD multi wipes, FD multi wipes compact

Vård

■ FD 360 Rengöring och vård av konstläder

Rengöringsvätska för djupverkande rengöring och skötsel av konstläderytor



- Rengöringsmedel kombinerat med medel för att förlänga utrustningens livslängd som är skonsamt mot materialet
- Intensiv rengöringsverkan - tar bort fläckar av alla slag, ränder och missfärgningar
- Kontrollerad materialkompatibilitet - rekommenderas av ledande unit-tillverkare
- Idealisk för behandlingsenheter i kombination med FD 366 sensitive

Innehåller: Specialtensider, silikonföreningar och avokadoolja som bas
Finns som: sats med 500 ml sprayflaska och tio specialsvampar
Vår rekommendation: FD 366 sensitive, FD 366 sensitive torkdukar

Desinfektionsdukar för ytor

■ FD 300 top wipes Ytdesinfektion*

Helt antivirala och alkoholfria desinfektions- och rengöringsdukar för ytor och föremål



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Extra kort verkningstid
- Enkla att ta ut ur modern dispenserbox
- Gripstruktur för snabb hantering

Verksamma ämnen: alkylamin, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: låda med 50 dukar
Dukstorlek: 17,5 x 25 cm

■ FD 312 wet wipes Ytdesinfektion*

Alkoholfria desinfektions- och rengöringsdukar för stora ytor



- Baktericid, levurocid, begränsat virucid
- Mycket dryg, klarar att fukta ytor upp till 8 m²
- Dukar med rivtålig struktur
- Med frisk doft

Verksamma ämnen: Kvartära ammoniumföreningar
Finns som: förpackning med 15 dukar
Dukstorlek: 22 x 42 cm

■ FD 333 wipes Snabbdesinfektion

Bruksfärdiga desinfektions- och rengöringsdukar med alkohol för mindre ytor



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Snabb desinfektionsverkan
- Torkar snabbt
- Parfymfri

Verksamma ämnen: alkoholer, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: dispenserburk med 110 servetter
servet storlek: 14 x 22 cm

■ FD 333 forte wipes

Fullt virusdödande bruksfärdiga desinfektions- och rengöringsdukar för ytor på medicintekniska produkter och medicinska inventarier



- Baktericid inkl. tb, fungicid, virucid (kontrollerad enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Snabb desinfektionsverkan
- Extra stora servetter
- Parfymfri

Verksamma ämnen: alkoholer, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: dispenserburk med 100 servetter
servet storlek: 20 x 30 cm

■ FD 350 Desinfektionsservetter

Snabbverkande desinfektions- och rengöringsdukar med alkohol för mindre ytor



- Baktericid inkl. tb, fungicid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus Polyoma SV 40-virus)
- Snabb desinfektionsverkan
- Torkar utan rester
- Tre olika dofttyper: Classic, Blommor, Citron

Verksamma ämnen: alkoholer
Finns som: dispenserburk med 110 servetter
servet storlek: 14 x 22 cm

■ FD 366 sensitive wipes

Bruksfärdiga desinfektions- och rengöringsdukar för ömtåliga ytor



- Baktericid, tuberkoloid, levurocid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus)
- Snabb desinfektionsverkan
- Extra stora servetter
- Parfymfri

Verksamma ämnen: alkoholer, kvartära ammoniumföreningar
Finns som: dispenserburk med 100 servetter
servet storlek: 20 x 30 cm

■ FD multi wipes

Universella, torra servetter, kan fuktas in med desinfektions- och rengöringsmedel



- Universellt användbara servetter i kombination med ytdesinfektionsmedel
- Luddfria och rivtåliga
- Fuktar mycket väl och repar inte ytor
- Mycket ekonomiska

Finns som: dispenserburk med 180 servetter
servet storlek: 20 x 30 cm
Vår rekommendation: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333 forte, FD 366 sensitive, vägghållare för FD multi wipes Box

■ FD multi wipes compact

Extra stora, torra servetter i smidig dispenserbox, kan fuktas in med desinfektions- och rengöringsmedel



- Universellt användbara servetter i kombination med ytdesinfektionsmedel
- Luddfria och rivtåliga
- Fuktar mycket väl och repar inte ytor
- Kompakt låda, extra stora servetter

Finns som: Dispenserburk med 60 servetter
servet storlek: 29 x 30 cm
Vår rekommendation: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333 forte, FD 366 sensitive

 *Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Hud och händer



Desinfektion och rengöring Handdesinfektion

■ HD 410* Handdesinfektion

Alkoholhaltigt medel som gnids in i huden och som används för hygienisk och kirurgisk desinfektion av händer



- Baktericid inkl. tb, levurocid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus, Polyoma SV 40-virus, Rota-virus)
- Ytterst snabb: Hygienisk handdesinfektion 15 sekunder/ kirurgisk handdesinfektion 90 sekunder
- Behaglig hudkänsla genom återfettning

Verksamma ämnen: alkoholer

Finns som: 500 ml, 500 ml för Hygocare Plus, 800 ml, 2,5 l, 10 l

Vår rekommendation: Universal-preparatdispenser S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, doseringspump

Handrengöring

■ HD 425 Tvättlotion

Mild tvättlotion för att tvätta hud och händer



- Alkali- och tvålfri
- Dermatologiskt kontrollerad – mycket skonsam
- Innehåller hudvårdande och återfettande ämnen
- Idealiskt kombipreparat för handdesinfektion HD 410 och HD 412 essential

Innehåll: Rengöringsaktiva tensider och vårdande komponenter som allantoin

Finns som: 500 ml

Vår rekommendation: HD 410, HD 412 essential, HD 440

■ HD 435 Tvättlotion

Mild, antimikrobiell tvättlotion med hudtypiskt pH-värde för att bevara den naturliga hudfloran



- Alkali- och tvålfri – bevarar hudens syraskyddsmantel
- Intensivt rengörande genom utvalda tvättaktiva komponenter
- Innehåller hudvårdande och återfettande ämnen samt faktorer som behåller hudens fuktighet
- Idealiskt kombipreparat för handdesinfektion HD 410 och HD 412 essential

Innehåll: Rengöringsaktiva tensider, antimikrobiella substanser samt allantoin

Finns som: 500 ml, 1 l, 2,5 l

Vår rekommendation: Universal-preparatdispenser S 400, L 400, L 1000, Touchless T 400, T 1000, doseringspump, HD 410, HD 412 essential, HD 440

Vård

■ HD 440 Lotion

Lotion för utsatt och känslig hud



- Skyddar, vårdar och förebygger inflammationer
- Förhindrar att huden torkar ut
- Beprövade innehållsämnen bevarar händernas smidighet
- Inte fet – dras snabbt in i huden

Innehåll: Vårdande oljor, hamamelisextrakt, allantoin

Finns som: 500 ml

Vår rekommendation: Universal-preparatdispenser S 400, L 400, doseringspump, HD 410, HD 412 essential, HD 425, HD 435

Dispensersystem

■ Universell preparatdispenser beröringsfri

Batteridriven sensordispenser för beröringsfri, hygienisk applicering av handpreparat



- Optimal handhygien genom beröringsfri användning
- Batteridrift med batteriindikering genom ljudsignal när batteribyte krävs
- Hög hygienstandard genom hölje av eloxerat aluminium
- Pump av rostfritt stål som kan autoklaveras

Mått (BxHxD): T 1000/T 400: 9,2x33,0x21,0 cm

Finns som: T 400 för 500 ml-flaska, T 1000 för 800 ml-/1l-flaska

Vår rekommendation: HD 410, HD 412 essential, HD 440 i 500 ml-flaska eller 800 ml-flaska, HD 435 i 1 l-flaska, skalkållare, bordsstativ

■ Universal-preparatdispenser

Universal-preparatdispenser för väggmontering, för applicering av handpreparat



- Mycket enkel att hantera
- Finns med kort (S) eller lång (L) spak
- Hållbart utförande i aluminium och rostfritt stål
- Autoklaverbar pump

Mått (BxHxD): S 400/L 400: 8,2x24,5x8,2 cm, spaklängd: S: 16 cm, L: 21,5 cm/L 1000: 9,2x29x9 cm, spaklängd: 22,5 cm

Finns som: S 400 och L 400 för 500 ml-flaska, L 1000 för 800 ml-/1l-flaska

Vår rekommendation: HD 410, HD 412 essential, HD 440 i 500 ml-flaska eller 800 ml-flaska, HD 435 i 1 l-flaska

i *Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



Desinfektion och rengöring Sugsystem och fontänskål

■ Orotol® plus sugsystemdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig desinficering, lukt borttagning, rengöring och skötsel av alla dentala sugsystem och amalgamavskiljare



- Baktericid inkl. tb, fungicid, begränsat virucid och okapslade virus (Adeno-virus, Noro-virus)
- Löser, desinficerar biofilm och förebygger slambildning från blod och proteiner
- Lösningen för förorenade sugsystem – ger säkert skydd mot infektioner
- Kontrollerad materialkompatibilitet – rekommenderas av ledande unit-tillverkare

Verksamma ämnen: Kvävtära ammoniumföreningar
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ Orotol® ultra sugsystemsdesinfektion

Koncentrat i pulverform för samtidig desinficering, lukt borttagning, rengöring och skötsel av alla dentala sugsystem och amalgamavskiljare



- Baktericid inkl. tb, sporicid (Clostridium difficile), fungicid, virucid (testat enligt DVV/RKI och EN 14476)
- Löser, desinficerar biofilm och förebygger slambildning från blod och proteiner
- Låg användningskoncentration (1 %)
- Kontrollerad materialkompatibilitet – rekommenderas av ledande unit-tillverkare

Verksamma ämnen: Natriumperkarbonat
Finns som: 500 g-påse
Vår rekommendation: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ MD 555 cleaner Specialrengöringsmedel för sugsystem

Skumfritt rengöringskoncentrat för sugsystem och amalgamavskiljare av alla slag



- Löser beläggningar av kalk, profylaxpulver eller Pearl-produkter
- Mycket intensiv rengöringsverkan mot avlagringar och slambildning
- Kontrollerad materialkompatibilitet – rekommenderas av ledande unit-tillverkare
- Idealisk att kombinera med Orotol® plus

Innehåll: Organiska och oorganiska syror, skumfria tensider
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

■ MD 550 Salivskålringsmedel

Skumfri, bruksfärdig lösning för intensiv rengöring av fontänskålar



- Tar utan problem bort rester från kalk, blod eller plackfärgämnen
- Samtidig rengöring, lukt borttagning och skötsel av fontänskålar
- Utan repande komponenter – inga repor i fontänskålen
- Antimikrobiell – verksam mot bakterier och svamp

Verksamma ämnen: alkoholer
Finns som: 750 ml
Vår rekommendation: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

■ OroCup Skötselsystem

Användarvänligt, slutet skötselsystem för desinfektion och rengöring av sugsystem och amalgamavskiljare



- Alstrar en blandning av luft och vatten som optimalt fuktar och effektivt rengör sugsystemet
- Rationellt arbete – ett system för blandning och genomsköljning av de bruksfärdiga lösningarna
- Anslutningsadapter för alla sugslangar

Finns som: 2 liter skötselsystem
Vår rekommendation: Orotol® plus, MD 555 cleaner

Avtryck och tandtekniska arbeten

■ MD 530 Cementborttagningsmedel och protesrengöringsmedel

Bruksfärdig lösning för borttagning av cement, tandsten, röckfläckar, oxidskikt osv.



- Intensiv rengöringsverkan och fullständig borttagning av syralösliga beläggningar
- För direkt användning och mycket skonsam mot material
- Särskilt snabb och effektiv genom specialrecept
- Innehåller korrosionsinhibitorer
- Lämplig för användning i ultraljudsbad

Innehåll: Organiska syror, tensider
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygobox, Hygasonic

■ MD 535 Gipsborttagare

Bruksfärdig lösning för borttagning av gips och alginat från avtrycksskedar och andra hjälpmedel



- Neutralt specialrengöringsmedel med särskilt snabb verkan
- Intensiv rengöringskraft för fullständig borttagning av gips och alginat
- Med aktivitetsindikator
- Lämplig för användning i ultraljudsbad

Innehåll: Alkaliska rengöringskomponenter och komplexbildare
Finns som: 2,5 l
Vår rekommendation: Hygobox, Hygasonic

■ MD 520 Avtrycksdesinfektion

Alkoholfri bruksfärdig lösning för effektiv och för materialet skonsam desinfektion och rengöring av avtryck, protetiska arbeten osv.



- Baktericid inkl. tb, levurocid, virucid (kontrollerad enligt EN 14476)
- Används för alginater, silikoner, polyeter, hydrokolloider, polysulfider osv.
- Ökad precision hos mastermodellen av gips genom effektiv rengöringsverkan
- Påverkar inte dimensionsstabiliteten eller gipskompatibiliteten

Verksamma ämnen: Kvävtära ammoniumföreningar, glutardialdehyd
Finns som: 2,5 l, 10 l
Vår rekommendation: desinfektionsburk, Hygobox, Hygojet

Enhet

■ Hygojet

Desinfektions- och rengöringsluss för avtryck och protetiska arbeten



- Det slutna systemet förhindrar korskontaminering
- Sparsam vid användningen – endast 10 ml MD 520 per avtryck
- Mycket effektiv – 6 avtryck inom 12 minuter
- Kontrollerad desinfektionsmetod – dokumenterat genom expertutlåtande

Mått (BxHxD): 56x34x32 cm
Vår rekommendation: MD 520

Verkan och användning

	Desinfektion	Rengöring	aldehydfri	biologiskt nedbrytbar	VAH-listad	IHO virucidlista	testad enligt EU-standarder	4-fälttest enligt VAH/EN 16615	baktericid	tuberkulocid	levurocid	fungicid	begränsat virucid (kapslade virus, inkl. HBV, HCV och HIV)	virucid	Program	Verkningsstid enligt VAH i min.	Inverkanstid i min i ultraljudsbad	Förvaringsstid i dagar
Instrument																		
ID 212 Instrumentdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	2%	5	2 ¹⁰	7	
ID 212 forte Instrumentdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	2%	5/60 ⁷	2 ⁸	7	
ID 213 Instrumentdesinfektion¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	2%	5/60 ⁷	2 ²	14	
ID 215 Enzymatiskt rengöringsmedel för instrument	■	■	■	■			■	■	■			■		1%/2%	30/15	15/1		
ID 220 Borrdesinfektion^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	utspädd	1 ⁷	0,5 ⁷	7	
Ytor																		
FD 300 Ytdesinfektion^{1, 15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	0,5%/1%/2%	60/15 ¹⁰ /5			
FD 312 Ytdesinfektion¹	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	1%	15			
FD 370 cleaner Rengöringsmedel för läkarmottagningar		■	■	■										1%/2%				
FD 322 Snabbdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	utspädd	1 ⁷			
FD 333 forte Snabbdesinfektion^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	utspädd	1 ⁷			
FD 360 Rengöring och vård av konstläder		■	■	■										utspädd				
FD 366 sensitive Desinfektion av känsliga ytor	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	utspädd	1 ¹¹			
FD 300 top wipes Ytdesinfektion¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	utspädd	2 ¹⁰			
FD 312 wet wipes Ytdesinfektion¹	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	■	utspädd	15			
FD 333 wipes Snabbdesinfektion¹⁶	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	utspädd	1 ¹²			
FD 333 forte wipes snabbdesinfektion^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	utspädd	1 ⁷			
FD 350 Desinfektionsservetter	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	utspädd	0,25 ⁷			
FD 366 sensitive servetter för desinfektion av känsliga ytor	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	utspädd	1 ¹¹			
Hud och händer																		
HD 410 Handdesinfektion^{2, 3}	■		■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	utspädd	0,25/1,5 ^{12,13}			
HD 412 essential Handdesinfektion	■		■	■	■	■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■	■	utspädd	0,5/5 ^{12,13}			
HD 425 Tvättlotion⁴		■	■	■										utspädd				
HD 435 Tvättlotion⁴		■	■	■										utspädd				
HD 440 Lotion			■	■										utspädd				
Specialområden																		
Orotol® plus sugsystemsdesinfektion	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁵	■ ⁵	■	2%	5/60 ⁷			
Orotol® ultra sugsystemsdesinfektion^{15, 16}	■	■	■	■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■ ⁵	■	1%	5			
MD 555 cleaner Specialrengöringsmedel för sugsystem		■	■	■										5%	30-120			
MD 550 Salivskållrengöringsmedel		■	■	■		■	■	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■ ⁶	■		utspädd	ca. 5			
MD 520 Avtrycksdesinfektion¹⁶	■	■		■	■	■	■	■ ⁵	■ ⁶	■ ⁵	■ ⁵	■	■	utspädd	5 ⁷ /10 ¹⁴		7	
MD 530 Cementborttagningsmedel/ protesrengöringsmedel		■	■	■										utspädd	max. 10	max. 10		
MD 535 Gipsborttagare		■	■	■										utspädd	e. beh.	e. beh.		

¹Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs före användning alltid etiketten och produktinformationen. ²ärfettande ³RKI-listat ⁴hudvänligt pH-värde ⁵hög belastning ⁶liten belastning ⁷inkl. Tb-bakterier ⁸för tb-bakterier 4%/30 min. ⁹för tb-bakterier 2%/30 min. ¹⁰för tb-bakterier 60 min. ¹¹för tb-bakterier 2 min. ¹²för tb-bakterier 30 sekunder ¹³hygienisk handdesinfektion/kirurgisk handdesinfektion ¹⁴i Hygojet ¹⁵testad enligt DVV/RKI ¹⁶testad enligt EN 14476